

VIDEOGASTROSCOPIO EVIS EXERA III


OLYMPUS GIF-1TH190**Instrucciones**

En las siguientes secciones se proporciona información actualizada sobre el procedimiento de secado. Seque completamente el endoscopio antes de la esterilización ETO o antes del almacenamiento, después de la desinfección, de acuerdo con el procedimiento de secado de este anexo.


■ Secado del endoscopio**PRECAUCIÓN**

Al insuflar aire en los canales del endoscopio, la presión de aire no debe ser superior a 0,5 MPa (5 kgf/cm², 72 psia). Una presión mayor puede dañar el endoscopio.


1. Confirme que el aire filtrado comprimido es de 0,2 - 0,5 MPa (2 - 5 kgf/cm², 29 - 72 psig).

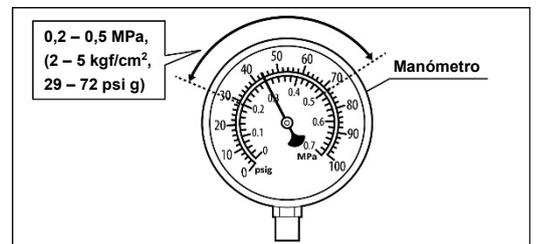

2. Para evitar salpicaduras por las aberturas de los canales, cubra el extremo distal, la sección de control y el conector del endoscopio con paños estériles que no suelten pelusas para evitar salpicaduras de alcohol de las entradas del canal.

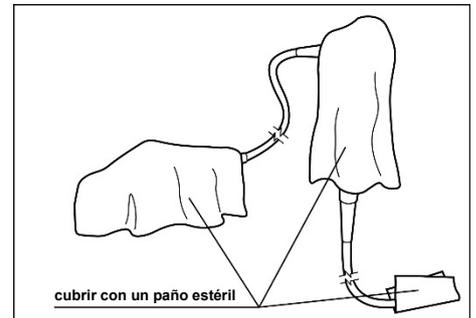


3. Prepare un temporizador y programa la alarma para que suene en 3 minutos.

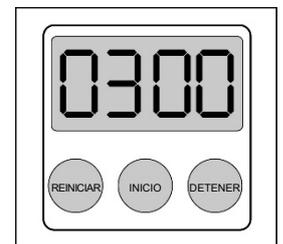


4. (1^{er} puerto) Sujetar la sección de control, y airear el cilindro de aspiración, de la siguiente manera:

1^{er} puerto
Cilindro de aspiración
(anillo rojo)

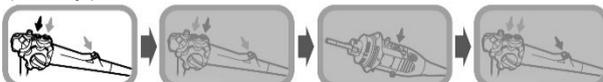


- a) Inicie el temporizador. (3 minutos)
- b) Introduzca la boquilla directamente en el cilindro de aspiración y sople.
- c) Siga soplando hasta que suene la alarma del temporizador.

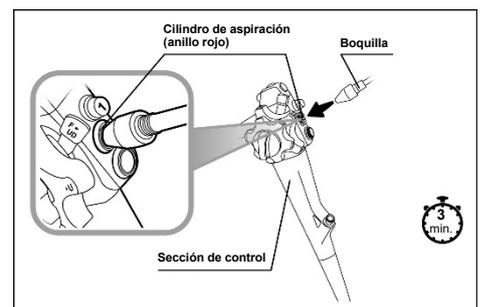


5. (2º puerto) Sujete la sección de control y airee el cilindro de aire/agua de la siguiente manera:




- Inicie el temporizador. (3 minutos)
- Introduzca la boquilla directamente en el cilindro de aire/agua y sople.
- Siga soplando hasta que suene la alarma del temporizador.

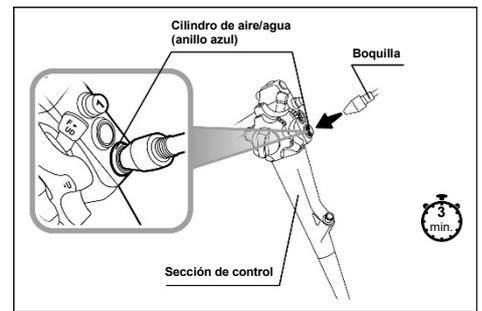


6. (3er puerto) Sujete el conector del endoscopio, y airee la entrada auxiliar de agua, como se indica a continuación:

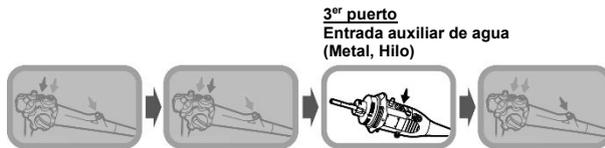


- Inicie el temporizador. (3 minutos)
- Empuje la punta de la boquilla directamente en la entrada auxiliar de agua para minimizar las fugas y soplar aire.
- Siga soplando hasta que suene la alarma del temporizador.

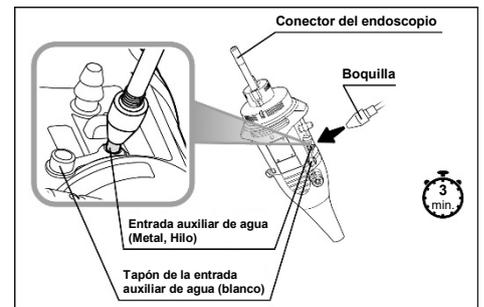


7. (4º puerto) Sujete la sección de control, y airee el puerto del canal de trabajo, de la siguiente manera:

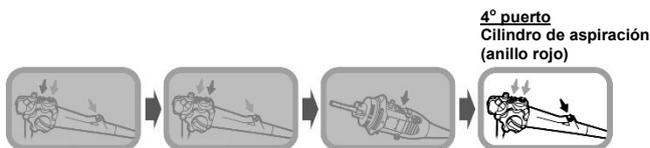

- Inicie el temporizador. (3 minutos)
- Empuje la boquilla directamente en el puerto del canal de trabajo y sople.
- Siga soplando hasta que suene la alarma del temporizador.

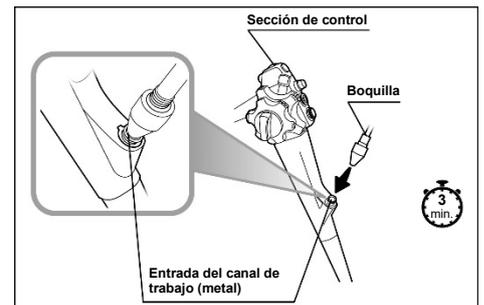


8. Seque por completo el interior del cilindro de aspiración, el cilindro de aire/agua, y la entrada del canal de trabajo del endoscopio con gasas de algodón estériles.

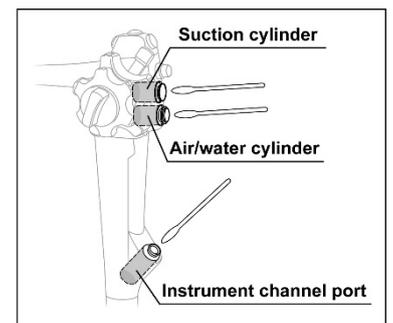

9. Limpie todas las superficies externas del endoscopio con un paño estéril que no suelte pelusas hasta que estén completamente secas.

- Conector del endoscopio
- Cable universal
- Sección de control
- Porción de inserción

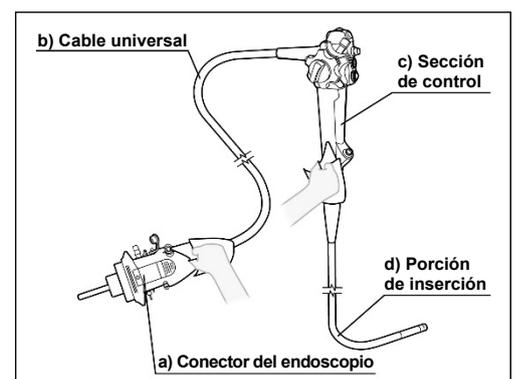

Fin.