

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road, Athlone
Westmeath, Irlanda

13 Mayo de 2024

URGENTE: AVISO DE SEGURIDAD EN EL CAMPO

Tipo de acción	Nota de advertencia			
Nombre del producto	Kit de catéter balón intraaórtico Arrow® FiberOptix™ Kit de catéter balón intraaórtico Arrow® UltraFlex™			
Referencia de Teleflex	EIF-000561			
Código de producto	IAB-05830-LWS	IAB-05830-U	IAB-05840-LWS	IAB-05840-U
	IAB-05850-LWS	IAB-06830-U	IAB-06840-U	IAB-06850-U
Número de lote:	Consulte el Anexo 2			
Identificador único del dispositivo (UDI)				

Estimado cliente:

Datos de los instrumentos afectados

Arrow International LLC, una filial de Teleflex Incorporated (colectivamente «Teleflex»), ha iniciado una acción correctora de seguridad en el campo («ACST») para los productos mencionados anteriormente. Consulte el Anexo 2 para obtener el código de los productos, el número de lote y la información sobre el identificador único del dispositivo («UDI»).

Descripción del problema y acciones inmediatas requeridas

Teleflex está iniciando esta ACST voluntaria de los productos mencionados anteriormente debido a los informes que indican una condición poco frecuente que, **cuando no se identifica y se corrige inmediatamente, podría dar lugar a consecuencias graves para la salud**. El problema puede manifestarse como:

- fallo del balón intraaórtico de inflarse completamente en toda su longitud;
- lumen central dañado o roto en el segmento contenido dentro del balón;
- pérdida de helio o sangre en la vía del helio.

Las posibles consecuencias del problema anterior incluyen una reducción o pérdida del soporte hemodinámico normalmente proporcionado por la terapia de BCIAo. Esto exigiría la sustitución inmediata del dispositivo, lo que provocaría un retraso o la interrupción temporal de la terapia de BCIAo. **Por lo tanto, esta afección podría aumentar el riesgo de complicaciones hemodinámicas o isquémicas, incluida la muerte.** Entre el 5 de abril de 2022 y el 5 de abril de 2024, se ha recibido un total de 337 informes de las afecciones mencionadas. Esto incluye los informes de 31 lesiones y 3 muertes. Como se informó, dos de las tres muertes no estaban relacionadas con el problema y el fallecimiento del paciente ocurrió varios días después. En el tercer caso, la muerte del paciente puede o no haber estado relacionada; el dispositivo se utilizó en choque cardiogénico profundo con alarmas repetidas de condición de rojo.

Acciones para detectar este problema:

1. Antes del uso, **asegúrese de que se dispone de un catéter balón intraaórtico de respaldo**, en caso de que sea necesario un dispositivo de sustitución.
2. Antes de la inserción, **los usuarios deben inspeccionar todos los catéteres balón intraaórticos incluidos en el endoscopio** por si presentaran signos de un envoltorio del balón excesivamente retorcido o de que el eje del balón se haya doblado. La torsión excesiva se manifiesta como un ángulo progresivo o tensión dentro del envoltorio helicoidal en el extremo distal o proximal del balón. En las imágenes 1a y 1b siguientes, se muestran ejemplos de envoltorio correcto en comparación con un envase demasiado retorcido. No inserte catéteres que se sospeche que presentan un envoltorio demasiado retorcido. **Sin embargo, no todos los catéteres afectados se manifestarán con un envoltorio del balón demasiado retorcido visiblemente.**

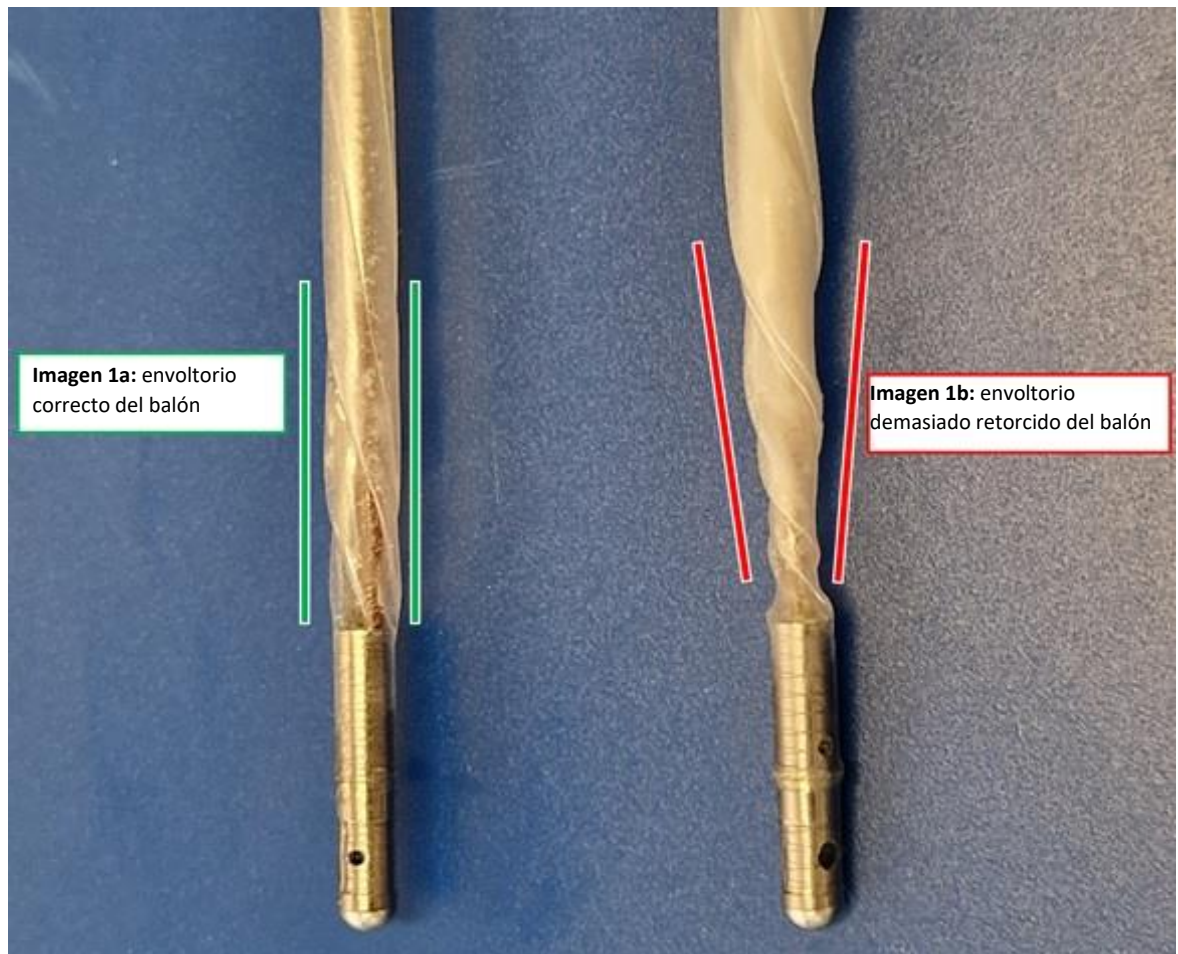


Imagen 1

3. Todos los catéteres de BCIAo incluidos deben insertarse bajo guía fluoroscópica. Una vez insertados y conectados, **se debe utilizar fluoroscopia para evaluar la integridad del inflado del balón**. La evaluación fluoroscópica debe abarcar toda la longitud del balón (con ampliación según sea necesario) y debe incluir varios ciclos de inflado/desinflado. La fluoroscopia intermitente debe permanecer disponible durante un máximo de 3 minutos después de que comience la contrapulsación cíclica uno a uno o hasta que se confirme que el balón se ha inflado por completo.
4. Como siempre, los usuarios deben estar atentos para responder a las alarmas de la bomba de conformidad con las Instrucciones de uso y la Guía del usuario.
 - En caso de que se utilice una bomba Ac3 o Autocat-2 de Arrow, puede sonar una **alarma de presión alta** o **alarma de línea base alta**, y mostrarse en la consola de la bomba. Estas alarmas de condición roja requieren atención inmediata según las Instrucciones de uso y la Guía del usuario. Las alarmas proporcionan a los usuarios un algoritmo de resolución de problemas que incluye un inflado del balón intraaórtico incompleto.
 - En el caso de que se utilice una bomba Getinge CardioSave, puede sonar una alarma de **Restricción del catéter balón intraaórtico**.
 - Cualquier **alarma de la bomba que indique fuga de helio (pérdida de helio o pérdida de gas)** puede indicar que el catéter balón intraaórtico no está funcionando del modo previsto.
 - Como siempre, la asistencia telefónica en tiempo real para los catéteres BCIAo y balón intraaórticos de Arrow está disponible en los datos de contacto de Asistencia al paciente que aparecen a continuación.
5. Como siempre, los usuarios deben estar atentos para responder a los indicadores al lado de la cama de que un catéter balón intraaórtico no funciona como se esperaba, incluyendo:
 - sangre en la vía del helio;
 - aumento de la presión diastólica inferior a lo esperado.

Acciones inmediatas si se identifica este problema:

Si se sospecha que un catéter balón intraaórtico presenta este problema, teniendo en cuenta cualquiera de las características anteriores, el catéter debe extraerse y sustituirse siguiendo los pasos descritos en las Instrucciones de uso. Un catéter balón de repuesto se puede insertar de forma contralateral o ipsilateral, según determine el médico responsable después de considerar las opciones de acceso femoral individuales del paciente y las características clínicas relevantes.

Cada incidencia presunta de esta afección debe informarse inmediatamente a Teleflex utilizando la información de contacto que se muestra a continuación tan pronto como sea práctico. Su representante de ventas local también puede ayudarle a completar un informe, si es necesario.

Nuestros registros indican que ha recibido productos que están sujetos a esta ACST.

El producto no se está retirando; podrá seguir utilizando los productos afectados por este aviso de advertencia de acuerdo con las instrucciones, advertencias y precauciones adicionales contenidas en este documento.

Dependiendo de la ubicación de su dispositivo, siga esta lista de acciones:

Ubicación del dispositivo	Número de lista de acciones
Centros médicos (hospitales, personal médico, etc.)	1
Distribuidores	2

Número de lista de acciones **1**: centros médicos

1. Envíe inmediatamente este aviso de advertencia a todas las personas que necesiten tener conocimiento de su contenido dentro de su organización (por ejemplo, unidad de cuidados coronarios, departamento de cardiología intervencionista, laboratorio de catéteres cardíacos, etc.). o de cualquier organización a la que se haya trasladado el producto potencialmente afectado.
2. Le solicitamos que compruebe inmediatamente si tiene en su inventario alguno de los productos incluidos en este Aviso urgente de dispositivo médico.
3. Si tiene un producto afectado, marque la casilla correspondiente en el formulario de confirmación (Anexo 1) y devuelva el formulario a Servicio de atención al cliente de Teleflex mediante los datos de contacto proporcionados y coloque una copia de este aviso con todos los productos afectados. Si desea devolver el producto afectado, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Teleflex mediante los datos de contacto proporcionados a continuación.
4. Si no tiene ningún producto afectado, marque la casilla correspondiente en el formulario de confirmación (Anexo 1) y devuelva el formulario a Teleflex de acuerdo con los datos de contacto proporcionados.

Número de lista de acciones **2** – Distribuidores

1. Actualice los datos de contacto de las páginas cuatro y cinco de los datos de contacto del servicio de atención al cliente de Teleflex a sus datos de contacto.
2. Proporcione inmediatamente este aviso de seguridad sobre el terreno a todos los clientes que hayan recibido el producto afectado. Solicite a su cliente que complete el formulario de confirmación (Anexo 1) y que se lo devuelva.
3. Le solicitamos que compruebe inmediatamente si su inventario contiene los productos afectados por esta ACST; consulte el Anexo 2 para ver la lista de códigos y lotes afectados. Coloque una copia de esta notificación con todos los productos afectados y asegúrese de que la notificación se incluya con las distribuciones futuras del producto afectado.

4. Como distribuidor, deberá confirmar a Teleflex que ha completado la acción sobre el terreno descrita en las acciones 1 y 2 de esta lista de acciones número 2. Una vez finalizada esta acción, reenvíe el formulario de confirmación al servicio de atención al cliente.
5. Tenga en cuenta que Teleflex informará a todas las autoridades competentes de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo/Suiza/Reino Unido (EEE/CH/UK) y Turquía en los que Teleflex distribuya directamente.
6. Si ha distribuido más productos fuera de su país, comuníquelo al servicio de atención al cliente de Teleflex enviando un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico.
7. Si es distribuidor o tiene la obligación de informar dentro o fuera de la región EEA/CH/TR/UK, comunique esta acción a las autoridades locales competentes. Reenvíe la notificación y todas las comunicaciones que haya mantenido con la autoridad local competente a Teleflex.

Notificación de acontecimientos adversos

Los acontecimientos adversos o los problemas de calidad experimentados durante el uso del producto deben notificarse al servicio de atención al cliente de Teleflex mediante los datos de contacto proporcionados a continuación.

Transmisión de este aviso de advertencia

Este aviso de advertencia debe otorgarse a todas las personas que necesiten tener conocimiento del mismo en su organización o en cualquier organización a la que se haya trasladado el producto potencialmente afectado.

Considere a los usuarios finales, médicos, gestores de riesgos, centros de distribución/cadena de suministro, departamentos de mantenimiento, etc. al poner en circulación este aviso. Mantenga la concienciación sobre este aviso hasta terminar todas las acciones necesarias en su organización.

Información de persona de contacto

Como siempre, la asistencia telefónica en tiempo real para los catéteres BCIAo y balón intraaórticos de Arrow está disponible en los datos de contacto de Asistencia al paciente que aparecen a continuación. Si necesita más información o ayuda sobre este problema, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Teleflex por correo electrónico, teléfono o fax.

Asistencia a los pacientes ininterrumpida:

Teléfono: (978) 250-5177 internacional

Servicio de atención al cliente:

Contacto: Gloria Blanco **Teléfono:** +34 649392681; +34 918300462

Correo electrónico: gloria.blanco@teleflex.com

Teleflex tiene el compromiso de ofrecer productos seguros y eficaces de gran calidad. Sentimos sinceramente cualquier inconveniente que esta acción pueda ocasionar en su trabajo. Si tiene cualquier otra duda, póngase en contacto con su delegado de ventas local de Teleflex o con el servicio de atención al cliente de Teleflex.

El infrascrito confirma que se ha notificado este aviso a la autoridad reguladora correspondiente.

Por y en nombre de Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty VP, Global QA (Manufacturing)

Anexo 1

N.º de cliente

ACCIÓN CORRECTIVA DE SEGURIDAD SOBRE EL CAMPO **FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN**

ACCIÓN EN EL CAMPO PARA EL PRODUCTO EMITIDA POR TELEFLEX – REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA

Ref. EIF-000561

DEVOLVER INMEDIATAMENTE EL FORMULARIO A:

Correo electrónico: gloria.blanco@teleflex.com

☐ Confirmamos la recepción de este aviso de advertencia y aseguramos haber completado las acciones necesarias que se incluyen en el presente. Además, confirmamos que nuestro inventario NO incluye los productos afectados por este aviso de advertencia.	☐ Confirmamos la recepción de este aviso de advertencia y aseguramos haber completado las acciones necesarias que se incluyen en el presente. Además, confirmamos que nuestro inventario INCLUYE productos afectados por este aviso de advertencia.
--	---

Rellene este formulario de confirmación y devuélvalo completado de inmediato usando la información de contacto indicada anteriormente.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN (P. EJ., NOMBRE DEL HOSPITAL O DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA)	
DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO/FAX
FORMULARIO RELLENADO POR:	Sello
NOMBRE EN LETRAS DE IMPRENTA: _____ FIRMA: _____	
FECHA	

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05830-LWS	18F23A0038	(01)10801902161892(17)241231(10)18F23A0038
IAB-05830-LWS	18F23B0023	(01)10801902161892(17)250131(10)18F23B0023
IAB-05830-LWS	18F23C0026	(01)10801902172843(17)250228(10)18F23C0026
IAB-05830-LWS	18F23D0024	(01)10801902161892(17)250430(10)18F23D0024
IAB-05830-LWS	18F23F0049	(01)10801902172843(17)250531(10)18F23F0049
IAB-05830-LWS	18F23H0060	(01)10801902161892(17)250731(10)18F23H0060
IAB-05830-LWS	18F23J0001	(01)10801902172843(17)250831(10)18F23J0001
IAB-05830-LWS	18F23J0075	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23J0075
IAB-05830-LWS	18F23K0013	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23K0013
IAB-05830-LWS	18F23L0019	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0019
IAB-05830-LWS	18F23L0041	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0041
IAB-05830-LWS	18F23L0054	(01)10801902172843(17)251031(10)18F23L0054
IAB-05830-LWS	18F23M0056	(01)10801902172843(17)251130(10)18F23M0056
IAB-05830-LWS	18F24A0015	(01)10801902172843(17)251231(10)18F24A0015
IAB-05830-LWS	18F24A0040	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24A0040
IAB-05830-LWS	18F24B0008	(01)10801902161892(17)260131(10)18F24B0008
IAB-05830-LWS	18F24B0013	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24B0013
IAB-05830-LWS	18F24C0058	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0058
IAB-05830-LWS	18F24C0061	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0061
IAB-05830-LWS	18F24C0088	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0088
IAB-05830-LWS	18F24C0089	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0089
IAB-05830-LWS	18F24C0101	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0101
IAB-05830-LWS	18F24C0109	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0109
IAB-05830-LWS	18F24C0110	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0110
IAB-05830-LWS	18F24C0172	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0172
IAB-05830-LWS	18F24C0173	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0173
IAB-05830-LWS	18F24C0174	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0174
IAB-05830-LWS	18F24C0175	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0175
IAB-05830-LWS	18F24C0176	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0176
IAB-05830-LWS	18F24C0185	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0185
IAB-05830-LWS	18F24D0002	(01)10801902161892(17)260331(10)18F24D0002
IAB-05830-U	18F22F0023	(01)10801902172850(17)240531(10)18F22F0023
IAB-05830-U	18F22G0005	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0005
IAB-05830-U	18F22G0010	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0010
IAB-05830-U	18F22H0033	(01)10801902172850(17)240731(10)18F22H0033
IAB-05830-U	18F23E0032	(01)10801902182019(17)250430(10)18F23E0032
IAB-05830-U	18F23J0002	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0002
IAB-05830-U	18F23J0031	(01)10801902172850(17)250831(10)18F23J0031
IAB-05830-U	18F23J0082	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0082
IAB-05830-U	18F23K0025	(01)10801902182019(17)250930(10)18F23K0025
IAB-05830-U	18F23K0036	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0036
IAB-05830-U	18F23K0042	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0042
IAB-05830-U	18F23M0001	(01)10801902172850(17)251130(10)18F23M0001
IAB-05830-U	18F24C0131	(01)10801902182019(17)260331(10)18F24C0131
IAB-05840-LWS	18F22E0008	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0008
IAB-05840-LWS	18F22E0029	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0029
IAB-05840-LWS	18F22F0006	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0006

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F22F0018	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0018
IAB-05840-LWS	18F22F0039	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0039
IAB-05840-LWS	18F22F0072	(01)10801902167733(17)240531(10)18F22F0072
IAB-05840-LWS	18F22G0002	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0002
IAB-05840-LWS	18F22G0003	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0003
IAB-05840-LWS	18F22G0019	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0019
IAB-05840-LWS	18F22G0021	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0021
IAB-05840-LWS	18F22G0031	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0031
IAB-05840-LWS	18F22G0046	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0046
IAB-05840-LWS	18F22G0059	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0059
IAB-05840-LWS	18F22H0009	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0009
IAB-05840-LWS	18F22H0023	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0023
IAB-05840-LWS	18F22H0035	(01)10801902172867(17)240731(10)18F22H0035
IAB-05840-LWS	18F22H0058	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0058
IAB-05840-LWS	18F22J0025	(01)10801902172867(17)240831(10)18F22J0025
IAB-05840-LWS	18F22K0015	(01)10801902167733(17)240930(10)18F22K0015
IAB-05840-LWS	18F22K0016	(01)10801902172867(17)240930(10)18F22K0016
IAB-05840-LWS	18F22M0017	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0017
IAB-05840-LWS	18F22M0018	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0018
IAB-05840-LWS	18F23A0004	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0004
IAB-05840-LWS	18F23A0005	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0005
IAB-05840-LWS	18F23A0018	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0018
IAB-05840-LWS	18F23A0026	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0026
IAB-05840-LWS	18F23B0008	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0008
IAB-05840-LWS	18F23B0016	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0016
IAB-05840-LWS	18F23E0020	(01)10801902172867(17)250430(10)18F23E0020
IAB-05840-LWS	18F23E0054	(01)10801902167733(17)250531(10)18F23E0054
IAB-05840-LWS	18F23F0002	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0002
IAB-05840-LWS	18F23F0026	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0026
IAB-05840-LWS	18F23G0008	(01)10801902172867(17)250630(10)18F23G0008
IAB-05840-LWS	18F23G0017	(01)10801902167733(17)250630(10)18F23G0017
IAB-05840-LWS	18F23G0057	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23G0057
IAB-05840-LWS	18F23H0013	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0013
IAB-05840-LWS	18F23H0029	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0029
IAB-05840-LWS	18F23H0055	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0055
IAB-05840-LWS	18F23H0064	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0064
IAB-05840-LWS	18F23J0003	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0003
IAB-05840-LWS	18F23J0037	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0037
IAB-05840-LWS	18F23J0072	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0072
IAB-05840-LWS	18F23J0073	(01)10801902172867(17)250930(10)18F23J0073
IAB-05840-LWS	18F23K0054	(01)10801902172867(17)251031(10)18F23K0054
IAB-05840-LWS	18F23L0009	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0009
IAB-05840-LWS	18F23L0028	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0028
IAB-05840-LWS	18F23L0055	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23L0055
IAB-05840-LWS	18F23M0043	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23M0043
IAB-05840-LWS	18F23M0068	(01)10801902167733(17)251231(10)18F23M0068
IAB-05840-LWS	18F24A0025	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0025

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24A0030	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0030
IAB-05840-LWS	18F24A0031	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0031
IAB-05840-LWS	18F24A0039	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0039
IAB-05840-LWS	18F24B0005	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0005
IAB-05840-LWS	18F24B0015	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0015
IAB-05840-LWS	18F24B0031	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0031
IAB-05840-LWS	18F24B0048	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0048
IAB-05840-LWS	18F24B0052	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0052
IAB-05840-LWS	18F24B0078	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24B0078
IAB-05840-LWS	18F24C0008	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0008
IAB-05840-LWS	18F24C0036	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0036
IAB-05840-LWS	18F24C0064	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0064
IAB-05840-LWS	18F24C0065	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0065
IAB-05840-LWS	18F24C0067	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0067
IAB-05840-LWS	18F24C0068	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0068
IAB-05840-LWS	18F24C0069	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0069
IAB-05840-LWS	18F24C0071	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0071
IAB-05840-LWS	18F24C0072	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0072
IAB-05840-LWS	18F24C0075	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0075
IAB-05840-LWS	18F24C0076	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0076
IAB-05840-LWS	18F24C0077	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0077
IAB-05840-LWS	18F24C0078	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0078
IAB-05840-LWS	18F24C0079	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0079
IAB-05840-LWS	18F24C0080	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0080
IAB-05840-LWS	18F24C0081	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0081
IAB-05840-LWS	18F24C0083	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0083
IAB-05840-LWS	18F24C0105	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0105
IAB-05840-LWS	18F24C0186	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0186
IAB-05840-LWS	18F24C0187	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0187
IAB-05840-LWS	18F24C0188	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0188
IAB-05840-LWS	18F24C0193	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0193
IAB-05840-LWS	18F24D0020	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0020
IAB-05840-LWS	18F24D0021	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0021
IAB-05840-LWS	18F24D0022	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0022
IAB-05840-LWS	18F24D0031	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0031
IAB-05840-LWS	18F24D0032	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0032
IAB-05840-LWS	18F24D0037	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0037
IAB-05840-LWS	18F24D0038	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0038
IAB-05840-LWS	18F24D0039	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0039
IAB-05840-LWS	18F24D0042	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0042
IAB-05840-LWS	18F24D0044	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0044
IAB-05840-LWS	18F24D0045	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0045
IAB-05840-LWS	18F24D0049	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0049
IAB-05840-LWS	18F24D0050	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0050
IAB-05840-LWS	18F24D0051	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0051
IAB-05840-LWS	18F24D0054	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0054
IAB-05840-LWS	18F24D0055	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0055

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24D0072	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0072
IAB-05840-LWS	18F24D0087	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0087
IAB-05840-LWS	18F24D0088	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0088
IAB-05840-LWS	18F24D0089	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0089
IAB-05840-LWS	18F24D0090	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0090
IAB-05840-LWS	18F24D0091	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0091
IAB-05840-LWS	18F24D0092	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0092
IAB-05840-U	18F22E0012	(01)10801902172874(17)240430(10)18F22E0012
IAB-05840-U	18F22G0011	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0011
IAB-05840-U	18F22G0016	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0016
IAB-05840-U	18F22G0051	(01)10801902161922(17)240630(10)18F22G0051
IAB-05840-U	18F23A0002	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0002
IAB-05840-U	18F23A0021	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0021
IAB-05840-U	18F23A0060	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0060
IAB-05840-U	18F23G0068	(01)10801902161922(17)250731(10)18F23G0068
IAB-05840-U	18F23K0008	(01)10801902172874(17)251130(10)18F23K0008
IAB-05840-U	18F23K0012	(01)10801902161922(17)250930(10)18F23K0012
IAB-05840-U	18F23K0039	(01)10801902172874(17)250930(10)18F23K0039
IAB-05840-U	18F23K0053	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0053
IAB-05840-U	18F23K0063	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0063
IAB-05840-U	18F23L0010	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0010
IAB-05840-U	18F23L0031	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0031
IAB-05840-U	18F23L0039	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0039
IAB-05840-U	18F24B0051	(01)10801902161922(17)260131(10)18F24B0051
IAB-05850-LWS	18F22J0037	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0037(13)220927
IAB-05850-LWS	18F22J0040	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0040(13)220929
IAB-05850-LWS	18F22K0044	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0044(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0045	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0045(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0056	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22K0056(13)221028
IAB-05850-LWS	18F22L0012	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22L0012(13)221104
IAB-05850-LWS	18F23K0006	(01)10801902167726(17)250930(10)18F23K0006(13)231031
IAB-05850-LWS	18F23K0038	(01)10801902172881(17)250930(10)18F23K0038(13)231028
IAB-05850-LWS	18F24B0049	(01)10801902167726(17)260131(10)18F24B0049(13)240227
IAB-05850-LWS	18F24B0075	(01)10801902167726(17)260228(10)18F24B0075(13)240301
IAB-05850-LWS	18F24C0031	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0031(13)240316
IAB-05850-LWS	18F24C0032	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0032(13)240331
IAB-05850-LWS	18F24C0033	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0033(13)240315
IAB-05850-LWS	18F24C0034	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0034(13)240315
IAB-06830-U	18F22E0062	(01)10801902172898(17)240430(10)18F22E0062
IAB-06830-U	18F22F0007	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0007
IAB-06830-U	18F22F0017	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0017
IAB-06830-U	18F22F0020	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0020
IAB-06830-U	18F22F0034	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0034
IAB-06830-U	18F22F0045	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0045
IAB-06830-U	18F22F0057	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0057
IAB-06830-U	18F22G0001	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0001
IAB-06830-U	18F22G0004	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0004

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06830-U	18F22G0007	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0007
IAB-06830-U	18F22G0014	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0014
IAB-06830-U	18F22H0002	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0002
IAB-06830-U	18F22H0008	(01)10801902161939(17)240731(10)18F22H0008
IAB-06830-U	18F22H0024	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0024
IAB-06830-U	18F22H0029	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0029
IAB-06830-U	18F22H0034	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0034
IAB-06830-U	18F22J0009	(01)10801902172898(17)240831(10)18F22J0009
IAB-06830-U	18F22M0019	(01)10801902161939(17)241130(10)18F22M0019
IAB-06830-U	18F23A0027	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0027
IAB-06830-U	18F23A0039	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0039
IAB-06830-U	18F23B0006	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0006
IAB-06830-U	18F23B0020	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0020
IAB-06830-U	18F23B0032	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0032
IAB-06830-U	18F23D0029	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23D0029
IAB-06830-U	18F23E0033	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0033
IAB-06830-U	18F23E0037	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0037
IAB-06830-U	18F23E0038	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0038
IAB-06830-U	18F23E0057	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0057
IAB-06830-U	18F23F0023	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0023
IAB-06830-U	18F23F0045	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0045
IAB-06830-U	18F23G0025	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0025
IAB-06830-U	18F23G0026	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0026
IAB-06830-U	18F23G0051	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0051
IAB-06830-U	18F23G0066	(01)10801902161939(17)250630(10)18F23G0066
IAB-06830-U	18F23G0067	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23G0067
IAB-06830-U	18F23H0009	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0009
IAB-06830-U	18F23H0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23H0011
IAB-06830-U	18F23H0025	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0025
IAB-06830-U	18F23H0028	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0028
IAB-06830-U	18F23H0059	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0059
IAB-06830-U	18F23H0069	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0069
IAB-06830-U	18F23H0070	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0070
IAB-06830-U	18F23H0074	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0074
IAB-06830-U	18F23H0080	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0080
IAB-06830-U	18F23J0004	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0004
IAB-06830-U	18F23J0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0011
IAB-06830-U	18F23J0015	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0015
IAB-06830-U	18F23J0046	(01)10801902161939(17)250831(10)18F23J0046
IAB-06830-U	18F23J0053	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0053
IAB-06830-U	18F23J0054	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0054
IAB-06830-U	18F23J0055	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0055
IAB-06830-U	18F23J0079	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23J0079
IAB-06830-U	18F23K0003	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0003
IAB-06830-U	18F23K0005	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0005
IAB-06830-U	18F23K0009	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0009
IAB-06830-U	18F23K0051	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0051

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06830-U	18F23K0059	(01)10801902161939(17)250930(10)18F23K0059
IAB-06830-U	18F23K0061	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0061
IAB-06830-U	18F23L0040	(01)10801902172898(17)251031(10)18F23L0040
IAB-06830-U	18F23M0002	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0002
IAB-06830-U	18F23M0044	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0044
IAB-06830-U	18F23M0049	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0049
IAB-06830-U	18F23M0053	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0053
IAB-06830-U	18F23M0054	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0054
IAB-06830-U	18F23M0055	(01)10801902172898(17)251231(10)18F23M0055
IAB-06830-U	18F24A0006	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0006
IAB-06830-U	18F24A0012	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0012
IAB-06830-U	18F24A0013	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0013
IAB-06830-U	18F24A0021	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0021
IAB-06830-U	18F24A0036	(01)10801902161939(17)251231(10)18F24A0036
IAB-06830-U	18F24B0014	(01)10801902172898(17)260131(10)18F24B0014
IAB-06830-U	18F24C0004	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0004
IAB-06830-U	18F24C0005	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0005
IAB-06830-U	18F24D0004	(01)10801902161939(17)260331(10)18F24D0004
IAB-06830-U	18F24D0033	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0033
IAB-06830-U	18F24D0036	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0036
IAB-06830-U	18F24D0043	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0043
IAB-06830-U	18F24D0048	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0048
IAB-06830-U	18F24D0086	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0086
IAB-06840-U	18F22E0001	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0001
IAB-06840-U	18F22E0009	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0009
IAB-06840-U	18F22E0014	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0014
IAB-06840-U	18F22E0020	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0020
IAB-06840-U	18F22E0023	(01)10801902161946(17)240430(10)18F22E0023
IAB-06840-U	18F22E0036	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0036
IAB-06840-U	18F22E0037	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0037
IAB-06840-U	18F22E0042	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0042
IAB-06840-U	18F22E0046	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0046
IAB-06840-U	18F22E0048	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0048
IAB-06840-U	18F22E0049	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0049
IAB-06840-U	18F22E0061	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0061
IAB-06840-U	18F22E0065	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0065
IAB-06840-U	18F22E0066	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0066
IAB-06840-U	18F22F0002	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0002
IAB-06840-U	18F22F0009	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0009
IAB-06840-U	18F22F0010	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0010
IAB-06840-U	18F22F0016	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0016
IAB-06840-U	18F22F0019	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0019
IAB-06840-U	18F22F0021	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0021
IAB-06840-U	18F22F0022	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0022
IAB-06840-U	18F22F0037	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0037
IAB-06840-U	18F22F0043	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0043
IAB-06840-U	18F22F0047	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0047

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F22F0050	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0050
IAB-06840-U	18F22F0051	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0051
IAB-06840-U	18F22F0054	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0054
IAB-06840-U	18F22F0065	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0065
IAB-06840-U	18F22F0066	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0066
IAB-06840-U	18F22F0067	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0067
IAB-06840-U	18F22G0067	(01)10801902172904(17)240630(10)18F22G0067
IAB-06840-U	18F22H0004	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0004
IAB-06840-U	18F22H0010	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0010
IAB-06840-U	18F22H0014	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0014
IAB-06840-U	18F22H0026	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22H0026
IAB-06840-U	18F22H0028	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0028
IAB-06840-U	18F22H0030	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0030
IAB-06840-U	18F22H0036	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0036
IAB-06840-U	18F22H0038	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0038
IAB-06840-U	18F22H0039	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0039
IAB-06840-U	18F22K0004	(01)10801902172904(17)240930(10)18F22K0004
IAB-06840-U	18F22M0015	(01)10801902161946(17)241130(10)18F22M0015
IAB-06840-U	18F23A0019	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0019
IAB-06840-U	18F23A0025	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23A0025
IAB-06840-U	18F23A0037	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0037
IAB-06840-U	18F23A0054	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0054
IAB-06840-U	18F23A0055	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0055
IAB-06840-U	18F23A0061	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0061
IAB-06840-U	18F23A0066	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0066
IAB-06840-U	18F23A0067	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0067
IAB-06840-U	18F23B0018	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23B0018
IAB-06840-U	18F23C0017	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0017
IAB-06840-U	18F23C0027	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0027
IAB-06840-U	18F23C0044	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0044
IAB-06840-U	18F23D0015	(01)10801902172904(17)250331(10)18F23D0015
IAB-06840-U	18F23D0018	(01)10801902161946(17)250331(10)18F23D0018
IAB-06840-U	18F23D0027	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0027
IAB-06840-U	18F23D0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0028
IAB-06840-U	18F23E0013	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0013
IAB-06840-U	18F23E0014	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0014
IAB-06840-U	18F23E0015	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0015
IAB-06840-U	18F23E0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0028
IAB-06840-U	18F23E0035	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0035
IAB-06840-U	18F23E0036	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0036
IAB-06840-U	18F23E0050	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0050
IAB-06840-U	18F23E0051	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0051
IAB-06840-U	18F23E0052	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0052
IAB-06840-U	18F23E0055	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23E0055
IAB-06840-U	18F23F0003	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0003
IAB-06840-U	18F23F0006	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0006
IAB-06840-U	18F23F0007	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0007

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F23F0014	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0014
IAB-06840-U	18F23F0015	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0015
IAB-06840-U	18F23F0024	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0024
IAB-06840-U	18F23F0025	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0025
IAB-06840-U	18F23F0048	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0048
IAB-06840-U	18F23F0052	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0052
IAB-06840-U	18F23F0054	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0054
IAB-06840-U	18F23F0059	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0059
IAB-06840-U	18F23G0002	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0002
IAB-06840-U	18F23G0003	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0003
IAB-06840-U	18F23G0005	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0005
IAB-06840-U	18F23G0007	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0007
IAB-06840-U	18F23G0011	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0011
IAB-06840-U	18F23G0014	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0014
IAB-06840-U	18F23G0028	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0028
IAB-06840-U	18F23G0050	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0050
IAB-06840-U	18F23G0053	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0053
IAB-06840-U	18F23G0063	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23G0063
IAB-06840-U	18F23G0064	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0064
IAB-06840-U	18F23G0065	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0065
IAB-06840-U	18F23H0033	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23H0033
IAB-06840-U	18F23H0034	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0034
IAB-06840-U	18F23H0035	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0035
IAB-06840-U	18F23H0038	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0038
IAB-06840-U	18F23H0053	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0053
IAB-06840-U	18F23H0057	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0057
IAB-06840-U	18F23H0058	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0058
IAB-06840-U	18F23H0071	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0071
IAB-06840-U	18F23H0075	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0075
IAB-06840-U	18F23J0006	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0006
IAB-06840-U	18F23J0008	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0008
IAB-06840-U	18F23J0014	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0014
IAB-06840-U	18F23J0018	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0018
IAB-06840-U	18F23J0019	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0019
IAB-06840-U	18F23J0035	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0035
IAB-06840-U	18F23J0041	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0041
IAB-06840-U	18F23J0042	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0042
IAB-06840-U	18F23J0050	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0050
IAB-06840-U	18F23K0017	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0017
IAB-06840-U	18F23K0018	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0018
IAB-06840-U	18F23K0019	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0019
IAB-06840-U	18F23K0027	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0027
IAB-06840-U	18F23K0028	(01)10801902161946(17)250930(10)18F23K0028
IAB-06840-U	18F23K0040	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0040
IAB-06840-U	18F23K0045	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0045
IAB-06840-U	18F23K0057	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0057
IAB-06840-U	18F23K0060	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23K0060

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F23L0006	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0006
IAB-06840-U	18F23L0029	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0029
IAB-06840-U	18F23L0030	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0030
IAB-06840-U	18F23M0019	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0019
IAB-06840-U	18F23M0020	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0020
IAB-06840-U	18F23M0037	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0037
IAB-06840-U	18F23M0039	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0039
IAB-06840-U	18F23M0040	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0040
IAB-06840-U	18F23M0041	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0041
IAB-06840-U	18F23M0064	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0064
IAB-06840-U	18F23M0065	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0065
IAB-06840-U	18F24A0002	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0002
IAB-06840-U	18F24A0003	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0003
IAB-06840-U	18F24A0004	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0004
IAB-06840-U	18F24A0005	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0005
IAB-06840-U	18F24A0014	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0014
IAB-06840-U	18F24A0016	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0016
IAB-06840-U	18F24A0022	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0022
IAB-06840-U	18F24A0023	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0023
IAB-06840-U	18F24A0024	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0024
IAB-06840-U	18F24A0038	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0038
IAB-06840-U	18F24B0006	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0006
IAB-06840-U	18F24B0007	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0007
IAB-06840-U	18F24B0023	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0023
IAB-06840-U	18F24B0024	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0024
IAB-06840-U	18F24B0025	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0025
IAB-06840-U	18F24B0026	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0026
IAB-06840-U	18F24B0027	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0027
IAB-06840-U	18F24B0028	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0028
IAB-06840-U	18F24B0045	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0045
IAB-06840-U	18F24B0046	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0046
IAB-06840-U	18F24B0047	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0047
IAB-06840-U	18F24B0067	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0067
IAB-06840-U	18F24B0068	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0068
IAB-06840-U	18F24B0069	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0069
IAB-06840-U	18F24B0070	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0070
IAB-06840-U	18F24B0071	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0071
IAB-06840-U	18F24C0006	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0006
IAB-06840-U	18F24C0007	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0007
IAB-06840-U	18F24C0028	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0028
IAB-06840-U	18F24C0029	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0029
IAB-06840-U	18F24C0030	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0030
IAB-06840-U	18F24C0038	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0038
IAB-06840-U	18F24C0092	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0092
IAB-06840-U	18F24C0120	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0120
IAB-06840-U	18F24C0121	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0121
IAB-06840-U	18F24C0141	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0141

Anexo 2: EIF-000561 - Código de producto / número de lote / información del identificador único del dispositivo (UDI)

Código de producto	Número de lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F24C0151	(01)10801902161946(17)260228(10)18F24C0151
IAB-06840-U	18F24C0171	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0171
IAB-06840-U	18F24C0177	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0177
IAB-06840-U	18F24C0178	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0178
IAB-06840-U	18F24C0179	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0179
IAB-06840-U	18F24C0180	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0180
IAB-06840-U	18F24C0195	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0195
IAB-06840-U	18F24D0014	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0014
IAB-06840-U	18F24D0017	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0017
IAB-06840-U	18F24D0030	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0030
IAB-06840-U	18R23G0002	(01)10801902172904(17)250331(10)18R23G0002
IAB-06850-U	18F22J0020	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0020(13)220916
IAB-06850-U	18F22J0038	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0038(13)220928
IAB-06850-U	18F22J0043	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0043(13)220930
IAB-06850-U	18F22K0001	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0001(13)221003
IAB-06850-U	18F22K0003	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0003(13)221004
IAB-06850-U	18F22K0006	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0006(13)221006
IAB-06850-U	18F22K0011	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0011(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0012	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0012(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0013	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0013(13)221007
IAB-06850-U	18F23A0075	(01)10801902144192(17)241231(10)18F23A0075(13)230131
IAB-06850-U	18F23B0005	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0005(13)230203
IAB-06850-U	18F23B0010	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0010(13)230206
IAB-06850-U	18F23B0029	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0029(13)230220
IAB-06850-U	18F23B0030	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0030(13)230220
IAB-06850-U	18F23C0007	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0007(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0008	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0008(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0014	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0014(13)230310
IAB-06850-U	18F23C0015	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0015(13)230310
IAB-06850-U	18F23F0016	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0016(13)230609
IAB-06850-U	18F23F0017	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0017(13)230609
IAB-06850-U	18F23H0061	(01)10801902172911(17)250831(10)18F23H0061(13)230911
IAB-06850-U	18F23J0043	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0043(13)230921
IAB-06850-U	18F23J0044	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0044(13)230923
IAB-06850-U	18F23J0078	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23J0078(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0015	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0015(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0024	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0024(13)231014
IAB-06850-U	18F23L0045	(01)10801902144192(17)251031(10)18F23L0045(13)231130
IAB-06850-U	18F23L0052	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0052(13)231205
IAB-06850-U	18F23L0058	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0058(13)231205
IAB-06850-U	18F24B0010	(01)10801902172911(17)260131(10)18F24B0010(13)240207
IAB-06850-U	18F24B0011	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0011(13)240209
IAB-06850-U	18F24B0012	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0012(13)240209

-Fin del documento-